

Por que considerar

EL PACEY CUFF



PACEY CUFF™
URETHRAL CONTROL DEVICE



DISPOSITIVO PARA LA INCONTINENCIA MASCULINA

El Pacey Cuff es un dispositivo para la incontinencia urinaria masculina. Se puede usar todo el día porque restringe el flujo de orina mientras permite el flujo de sangre. El dispositivo se adapta a la anatomía masculina, ya que la vena y la arteria principales se encuentran en la superficie dorsal y la uretra en la superficie ventral. Evitando problemas que se observan con las pinzas, como la oclusión del flujo sanguíneo y la irritación.

VALOR

- Se puede usar las 24 horas.
- No restringe el flujo de sangre.
- Ligero y discreto.
- Se puede utilizar después de la prostatectomía.

CUANDO USAR EL PACEY CUFF



Post-Prostatectomía *

Los pacientes posprostatectomía, sin sospecha de falla anastomótica a los que se les haya retirado el catéter y sin indicadores de infección, pueden usar el Pacey Cuff.



Radioterapia

Cuando se trata el cáncer de próstata con radioterapia, se prefiere tener la vejiga llena. Pacey Cuff es una solución externa rentable que ayuda a mantener la vejiga llena y a evitar fugas.



Esfínteres artificiales AUS

Además de ser compatible con todos los dispositivos de esfínter urinario artificial (AUS), el Pacey Cuff es muy recomendable porque se ha demostrado que prolonga la vida útil del AUS.

PROTECCIÓN DE CIRCULACIÓN MÉTODOS DE PRUEBA



100%

Cirugía Vasculor Ultrasonido Doppler

Estas pruebas muestran que, en presencia de circulación normal, el dispositivo Pacey Cuff puede ocluir la uretra y proteger el flujo sanguíneo.



100%

Control Urinario

Oximetría de pulso

Resultados de un estudio de oximetría de pulso en el Pacey Cuff:

Pulso: 76.

SPO2 98.



3-5 sec.

Tiempo de llenado capilar:

Se observa el retorno de color y sangre en 3-5 segundos en la cabeza del pene con la compresión liberada.

*Vaya a la última página para todo leer el Protocolo de Rapoport Post-Prostatectomía completo.

EL PACEY CUFF



PACEY CUFF™
URETHRAL CONTROL DEVICE



SAFETY EFFICACY CLINICAL STUDY SUMMARY

Jula A., Logadottir Y., Olsen Ekerhult T., Academia Sahlgrenska, Instituto de Ciencias Clínicas, Departamento de Urología, Gotemburgo, Suecia – mayo de 2020.

Un estudio piloto prospectivo incluyó pacientes con pérdida de orina y pinzas peneanas con una circunferencia de 4-6 cm (pequeño), 7-9 cm (mediano) y >10 cm (grande). Los criterios de inclusión consistieron en una buena función de la mano, una función cognitiva completa y una longitud mínima de 3 cm y una circunferencia de 5 cm del pene.

El estudio consistió en información y valoración del paciente, recogida de compresas y medición del pene. Instrucciones de uso de la pinza, en intervalos de dos horas y durante la noche.

CONCLUSIÓN


La abrazadera del pene muestra resultados prometedores al reducir las fugas con riesgos mínimos de complicaciones. Se mejora la calidad de vida, incluso con fugas persistentes cuando no se usa la pinza. La pinza peneana es un buen tratamiento para pacientes no aptos para cirugía de incontinencia. Sin embargo, la selección del paciente es de suma importancia con respecto a la mano y la función cognitiva, así como la anatomía del pene.

RESULTS OF THE STUDY

- Los resultados mostraron una mediana reducción de las pérdidas de orina.
- Los pacientes lo encontraron cómodo de usar
- Los pacientes recomendarían la abrazadera a otras personas con un problema similar



EL PACEY CUFF EN NUMEROS

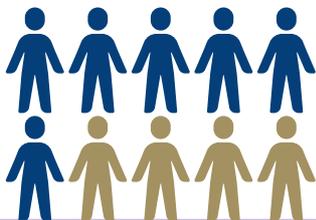

13,000+

Pacientes han utilizados con éxito el Pacey Cuff.

Premio Joule Innovations



El Pacey Cuff fue ganador como dispositivo de control uretral Innovación.

Eventos Adversos Graves

0%

Se han vendido más de 15 000 unidades de nuestro dispositivo médico y no se han informado eventos adversos graves.

ELEGIR EL SIZE CORRECTO



Pacey Cuff Tabla de Sizes

Circunferencia

Si tu medida esta entre dos tallas, recomendamos elegir la más grande.

	Centímetros	Pulgadas
Small	3 - 7 cm	1 - 2.75"
Medium	7 - 11 cm	2.75 - 4"
Large	11 - 14 cm	4 - 5.5"

Largo

Este número indica la longitud mínima requerida para asegurarlo en su lugar

	Centímetros	Pulgadas
Small	3 cm	1.25"
Medium	4 cm	1.75"
Large	5 cm	2"

Elegir el tamaño correcto es esencial para una resultado exitoso.

COMO APLICAR EL PACEY CUFF



PASO 1

Aplice el Power Sleeve en la mitad del eje del pene y asegure el cierre de velcro.

El Power Sleeve de la pinza para el pene debe estar ajustado, pero no apretado.



PASO 2

Coloque el Pacey Cuff sobre el extremo del pene y céntralo sobre el Power Sleeve. Asegúrese de centrar el compresor uretral debajo de la uretra.



PASO 3

Asegure el brazalete comprimiendo las partes superior e inferior con la correa de velcro y anote el número.

Verifique si hay pellizcos o fugas y verifique dos veces que las partes superior e inferior aún estén centradas en su pene.



PACEY CUFF™
URETHRAL CONTROL DEVICE

PROTOCOLO POST-PROSTATECTOMÍA

Protocolo Rapoport Postoperatorio
Dr. Daniel Rapoport, M.D. (Br. Col.), FRCSC – Urologo,
Department of Medicine, UBC.

Protocolo de Indicaciones para el uso del Pacey Cuff

Los pacientes posprostatectomía sin sospecha de falla anastomótica a los que se les haya retirado el catéter y sin indicadores de infección, que tengan incontinencia demostrada y que hayan tenido autorización del cirujano, pueden utilizar el Pacey Cuff. Pacey Cuff se usa hasta que se resuelve la incontinencia para reducir el uso de almohadillas absorbentes por parte del paciente. El control de fugas del paciente aumenta la autoestima y la movilidad al brindarle al paciente una herramienta para aplicar a voluntad.

Retiro del Catéter Posterior a la Prostatectomía

Su catéter de Foley debe retirarse aproximadamente 10 días después del día de la cirugía. El día que le vayan a retirar el catéter, beba muchos líquidos antes de llegar al consultorio.

El propósito de la visita es asegurarse de que pueda orinar con un chorro fuerte después de la extracción del catéter; la recuperación del control urinario total vendrá después.

El retorno del control de esfínteres después de la extracción del catéter ocurre:

- 1º de noche.
- 2º al sentarse.
- 3º al deambular.

Cicatrización de la herida

La mayor parte de la curación ocurre en las primeras 6 a 8 semanas después de la cirugía. Entonces el Pacey Cuff se convierte en una opción.

Utilice el postoperatorio Pacey Cuff con el acuerdo de los urólogos. Se sugiere un retraso de más de 3 semanas después de la extracción del catéter.

Contraindicaciones

- El uso del Pacey Cuff demasiado pronto podría interferir con el progreso del retorno del control voluntario de la vejiga.
- No use el manguito Pacey si hay infección.
- El Pacey Cuff no debe usarse por la noche durante este período.
- El manguito Pacey no debe usarse de forma continua, sino durante períodos de movilidad en los que existe el riesgo de que se produzcan muchas fugas y se ensucie la ropa.
- No lo use si el paciente ha recuperado la continencia.

Recomendaciones

Recomiende el uso de los ejercicios pélvicos para el paciente que usa el brazalete. Fomentar la movilidad del paciente durante el período de recuperación para el estado físico general.

Luego uso del Pacey Cuff debe reducirse progresivamente a medida que se recupera el control del esfínter. El uso de la almohadilla debe continuar cuando se usa el manguito Pacey.